


minimus® III

**Riester**

The familiar way

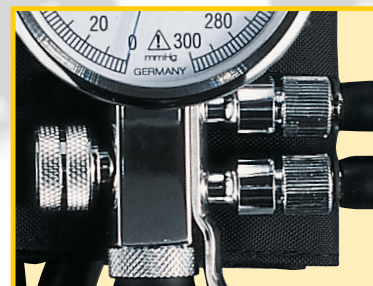

**Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.** The embodiment of palm-style blood-pressure measuring technology! Designed for **precision and longevity**, minimus® III is provided with a twin tube, a chromium-plated metal housing and a metal valve base. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Cotton bandage cuff, adult  
Cotton hook cuff, adult  
Calibrated nylon velcro cuff, adult

black  
**No. 1340**  
**No. 1341**  
**No. 1342**

# minimus® III

# Riester

## The familiar way

➔ **Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.** Die Konsequenz in der Einhand-Blutdruckmesstechnik! Ausgelegt auf **Präzision und Langlebigkeit** verfügt minimus® III mit Doppelschlauch über ein verchromtes Metallgehäuse, genauso wie über verchromte Schlauchverschraubungen und einen Ventilssockel aus Metall. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg

- Inkl. Vinyl-Reißverschlussstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Baumwoll-Wickelmanschette Erw.       | schwarz         |
| Baumwoll-Hakenmanschette Erw.        | <b>Nr. 1340</b> |
| Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erw. | <b>Nr. 1341</b> |
|                                      | <b>Nr. 1342</b> |

➔ **Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.** La rigueur et la consistance mêmes dans la technique de prise tension artérielle par tensiomètre manopaire ! Conçu pour offrir **précision et longévité**, minimus® III à deux tubes est équipé d'un boîtier en métal chromé, de raccords chromés à vis pour la tubulure, ainsi que d'un socle métallique de valve. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg

- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

|  |                |
|--|----------------|
| Brassard enveloppant, en coton, adulte             | noir           |
| Brassard à crochets, en coton, adulte              | <b>N° 1340</b> |
| Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte | <b>N° 1341</b> |
|  | <b>N° 1342</b> |

➔ **Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.** ¡La mejor tecnología para medición monomanual de la tensión arterial! El minimus® III con doble tubo está diseñado para lograr la máxima **precisión y duración de la vida útil**: dispone de una carcasa metálica cromada, uniones atornilladas del tubo cromadas y base de válvula metálica. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg

- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes

|  |                 |
|--|-----------------|
| Brazaletes de algodón arrollable, adultos          | negro           |
| Brazaletes de algodón con gancho, adultos          | <b>No. 1340</b> |
| Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos | <b>No. 1341</b> |
|  | <b>No. 1342</b> |

➔ **высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.** Последовательное развитие модельного ряда minimus! В minimus® III **особое внимание уделено точности и продолжительному сроку службы.** С двойным шлангом и хромированным металлическим корпусом, хромированными винтами для шланга. Металлическое основание клапана. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Латексная груша с хромированным спускным клапаном
- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки
- Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему
- Рукоятка из нержавеющей стали
- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной
- Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст
- Максимально допустимая погрешность прибора +/- 3 мм рт.ст

- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст
- В виниловой сумке на молнии
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей

|   |               |
|---|---------------|
| Тонومتر с обматывающей манжетой для взрослых          | черный        |
| Тонومتر с манжетой на крючковой застежке для взрослых | <b>№ 1340</b> |
| Тонومتر с манжетой на липучке для взрослых            | <b>№ 1341</b> |
|   | <b>№ 1342</b> |